



**Rotary Grinding and  
Polishing Instruments**

**Finier- und  
Poliersystem**

**Finishing and  
Polishing System**



**made  
in  
Germany**

## Finishing and Polishing System



Snap-On



Snap-On

### EVE FLEXI-D / FLEXI-S

Bei diesem Poliersystem handelt es sich um flexible Polierscheiben zum Abtragen, Glätten und Polieren. Die Scheiben sind beschichtet mit Aluminiumoxid und bestehen bei vielfältigen Anwendungen. Die Einsatzgebiete sind alle marktüblichen Composite.

Bei den EVE FLEXI-D handelt es sich um ein vierstufiges Poliersystem. Der Messingring in der Mitte sorgt für eine sichere Fixierung. Durch die einseitige Belegung kann sowohl ziehend als auch schiebend gearbeitet werden ohne in Zahnzwischenräumen den benachbarten Zahn zu schädigen. Besondere Stärke ist hierbei die inzisale-, zervikale- und approximale Anwendung mit vorbereitender Füllungsbearbeitung. Die Mandrelle aus rostfreiem Stahl sind für die Desinfektion und Sterilisation vorgesehen.


Für den EVE FLEXI-S gelten die gleichen Applikationen, allerdings haben diese Polierscheiben eine Kunststoffhülse, die auf das Mandrell aufgeschoben wird (Snap-on System). Dadurch ist die Gesamtlänge des Instrumentes sehr kurz und kann sehr effizient im Seitenzahnbereich angewendet werden. Die Körnungsabstufung beider Systeme ist identisch.

### EVE FLEXI-D / FLEXI-S

This polishing system consists of flexible polishing discs for scaling, buffing and polishing. The discs are coated with aluminium oxide and produce impressive results over a range of applications. All composites commonly found on the market are suitable for application.

The EVE FLEXI-D is a four-stage polishing system. The brass ring in the centre ensures a secure attachment. The single-sided configuration allows the user to work with both a pulling and a pushing motion, without damaging the neighbouring tooth in the interdental spacings. Particular strengths of this include incisal, cervical and approximal uses with preparatory filling work. The stainless steel mandrels are intended for disinfection and sterilisation.


The EVE FLEXI-S is designed for the same applications, but these polishing discs have a plastic capsule that is placed over the mandrel (snap-on system). This means that the total length of the instrument is very short and it can be used very efficiently in the posterior tooth area. The coarseness gradation of both systems is identical.

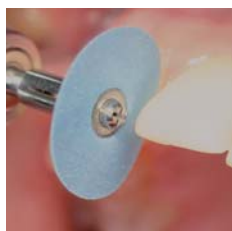


Blau = Abtragen  
Blue = Reducing



Rot = Glätten  
Red = Smoothing

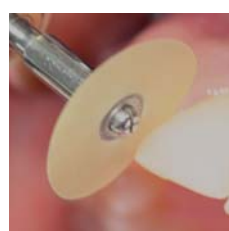

Gelb = Politur  
Yellow = Polishing

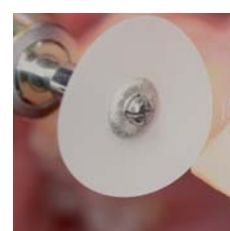

Weiß = Hochglanz  
White = High-lustre



### Starter Kit enthält:

25 Polierscheiben jeder Körnung, (mittel, fein, extra-fein, ultra-fein), inkl. 1 Mandrell.

### Starter Kit contains:

25 polishing discs of each grit (medium, fine, extra-fine, ultra-fine), incl. 1 mandrel.

Bestell- Nr. / Order No. **Flexi-S (12mm): 16355P100**

Bestell- Nr. / Order No. **Flexi-D (10mm): 16325P100**

Bestell- Nr. / Order No. **Flexi-D (14mm): 16315P100**



## FLEXI-S

Drehzahl: max. 15.000 min<sup>-1</sup>  
RPM: max. 15.000 min<sup>-1</sup>



Artikel-Bez.: / Item:
Artikel-Nr.: / Item No.:
Maße (mm): / Sizes (mm):
Körnung / Grit:
Packung / Pack:

FS-12g	FS-12m	FS-12f	FS-12sf
16350	16351	16352	16353
12 x 0,21	12 x 0,17	12 x 0,14	12 x 0,11
grob/coarse	mittel/medium	fein/fine	extra-fein/extra-fine
100 Stück / pieces	100 Stück / pieces	100 Stück / pieces	100 Stück / pieces



3, 10, 100 Stück / pieces


## FLEXI-D

Drehzahl: max. 15.000 min<sup>-1</sup>  
RPM: max. 15.000 min<sup>-1</sup>



Artikel-Bez.: / Item:
Artikel-Nr.: / Item No.:
Maße (mm): / Sizes (mm):
Körnung / Grit:
Packung / Pack:

FD-10g	FD-10m	FD-10f	FD-10sf
16300	16310	16320	16330
10 x 0,21	10 x 0,17	10 x 0,14	10 x 0,11
grob/coarse	mittel/medium	fein/fine	extra-fein/extra-fine
100 Stück / pieces	100 Stück / pieces	100 Stück / pieces	100 Stück / pieces

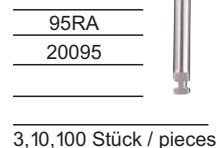

3, 10, 100 Stück / pieces

Drehzahl: max. 15.000 min<sup>-1</sup>  
RPM: max. 15.000 min<sup>-1</sup>



Artikel-Bez.: / Item:
Artikel-Nr.: / Item No.:
Maße (mm): / Sizes (mm):
Körnung / Grit:
Packung / Pack:

FD-14g	FD-14m	FD-14f	FD-14sf
16301	16311	16321	16331
14 x 0,21	14 x 0,17	14 x 0,14	14 x 0,11
grob/coarse	mittel/medium	fein/fine	extra-fein/extra-fine
100 Stück / pieces	100 Stück / pieces	100 Stück / pieces	100 Stück / pieces



## EVE PROPHY STRIPES




### Finier- und Polierstreifen

Die Streifen bestehen aus äußerst flexiblem Polyestermaterial und sind einseitig mit Aluminiumoxidpartikeln beschichtet.

### Finishing and polishing stripes

These stripes are made of high flexible polyester and coated on one face with aluminium oxide particles.

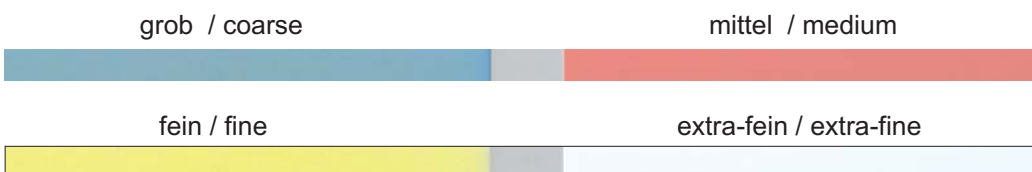

Set PS-50: 25 / 25 Stück / pieces  
Artikel-Nr. / Item No.: 41010  
Packung / Pack: 50 Stück / pieces

Artikel-Bez.: / Item:
Artikel-Nr.: / Item No.:
Stärke (mm): / Thickness (mm):
Maße (mm): / Sizes (mm):

PS-60/40	PS-20/7
41001	41002
0,15	0,15
4 x 150	4 x 150



**Rotary Grinding and  
Polishing Instruments**

EVE Ernst Vetter GmbH  
Rastatter Strasse 30  
D-75179 Pforzheim, Germany  
Fon +49 72 31 97 77 -0  
Fax +49 72 31 97 77 99  
info@eve-rotary.com

EVE America, Inc.  
5880 Shirley St.  
Unit 203  
Naples, FL 34109, USA  
Fon +1 239 591 2777  
Fax +1 239 591 2007  
info@eve-america.com

[www.eve-rotary.com](http://www.eve-rotary.com)



Ausgabe 01/2010 / Edition 01/2010

